

HEIMOVE

SICHER KOMPLETT VERSORGT



STABIL UND ROBUST FÜR VIELE JAHRE.

Instrumenten- und Gerätetische, Transportwagen

EINZIGARTIG UND SICHER

Extra wendige Rollen für ein **sicheres und angenehmes Fahrgefühl**. Das besondere an unserem Instrumententisch ist, dass **alle vier Rollen einzeln feststellbar** sind.



DER WENDIGE INSTRUMENTENTISCH.

Wendig und hoch flexibel für den vielseitigen Einsatz.

Die Instrumententische sind in ihren Abmessungen abgestimmt auf die DIN-Norm für StE-Container. Der komplett verschweißte Rahmen, gefertigt aus Chromnickelstahl 1.4301, sorgt für eine hohe Belastbarkeit. Die effizienten Wandabweiser dienen für maximalen Schutz aller Ecken, Kanten und Wände. Die Doppelaufrollen haben einen Durchmesser von 100 mm, alle 4 Rollen sind elektrisch leitend und einzeln feststellbar. Sie können Tischgröße und -höhe beliebig kombinieren. Je nach Größe und Zubehör kann der Instrumententisch auch als Gerätetisch oder Transportwagen eingesetzt werden.

Vier Tischgrößen:	650 x 450 mm	750 x 650 mm	950 x 650 mm	1.250 x 650 mm
Gesamtabmessungen:	730 x 530 mm	830 x 730 mm	1.040 x 730 mm	1.340 x 730 mm
Vier Höhen:	650 mm	800 mm	900 mm	1.000 mm

Wählen Sie die passende Tischplatte aus verschiedenen Bauweisen.

Die Tischplatten werden aus Chromnickelstahl gefertigt, sowie die Oberfläche fein geschliffen. Unten findet sich standardmäßig eine fest verschweißte, bündige CNS-Platte. Belastbarkeit 60 kg pro Platte, bei verteilter Belastung (50 kg bei Modell 1.250 x 650 mm)

MODELL EINGELEGT,
ABNEHMBAR



Eingelegte, abgesenkte Platte
passgenau mit Schutzrand gekantet und
fixiert.

MODELL EINGELEGT, MIT
GALERIE, ABNEHMBAR



Die eingelegte, fixierte Platte zusätzlich
mit 3-seitiger angeformter Galerie aus
CNS.

MODELL BÜNDIG,
ABNEHMBAR



Aufliegende, glatte Arbeitsfläche mit passgenauer Auflage
der Tischplatte durch zusätzliche Prägungen.

Dadurch ist die Tischplatte fest auf dem Rahmen fixiert
und kann gleichzeitig einfach abgenommen werden.



Wählen Sie aus 48 verschiedenen Modellvarianten.

INSTRUMENTENTISCH
650 X 450 MM



Höhe	650 mm	800 mm	900 mm	1.000 mm
Bündig	HSOIT654565-BB	HSOIT654580-BB	HSOIT654590-BB	HSOIT6545100-BB
Eingelegt	HSOIT654565-EB	HSOIT654580-EB	HSOIT654590-EB	HSOIT6545100-EB
Galerie	HSOIT654565-GB	HSOIT654580-GB	HSOIT654590-GB	HSOIT6545100-GB

INSTRUMENTENTISCH
750 X 650 MM



Höhe	650 mm	800 mm	900 mm	1.000 mm
Bündig	HSOIT756565-BB	HSOIT756580-BB	HSOIT756590-BB	HSOIT7565100-BB
Eingelegt	HSOIT756565-EB	HSOIT756580-EB	HSOIT756590-EB	HSOIT7565100-EB
Galerie	HSOIT756565-GB	HSOIT756580-GB	HSOIT756590-GB	HSOIT7565100-GB

INSTRUMENTENTISCH
950 X 650 MM



Höhe	650 mm	800 mm	900 mm	1.000 mm
Bündig	HSOIT956565-BB	HSOIT956580-BB	HSOIT956590-BB	HSOIT9565100-BB
Eingelegt	HSOIT956565-EB	HSOIT956580-EB	HSOIT956590-EB	HSOIT9565100-EB
Galerie	HSOIT956565-GB	HSOIT956580-GB	HSOIT956590-GB	HSOIT9565100-GB

INSTRUMENTENTISCH
1.250 X 650 MM



Höhe	650 mm	800 mm	900 mm	1.000 mm
Bündig	HSOIT1256565-BB	HSOIT1256580-BB	HSOIT1256590-BB	HSOIT12565100-BB
Eingelegt	HSOIT1256565-EB	HSOIT1256580-EB	HSOIT1256590-EB	HSOIT12565100-EB
Galerie	HSOIT1256565-GB	HSOIT1256580-GB	HSOIT1256590-GB	HSOIT12565100-GB

Wählen Sie aus zahlreichen Zubehörelementen aus.

Je nach Abmessungen, der Wahl der Rolle und des Zubehörs lässt sich der Instrumententisch vielseitig einsetzen und zusätzlich mit einer Schublade, einer weiteren Ablageebene, einer abklappbaren Zusatzplatte und einem praktischen Schiebegriff beliebig erweitern.

SCHUBLADE



bündige Verblendung an den Seiten und hinten
Schublade in voller Breite
untere Schubladen-Front als Griffleiste
Artikel Nr - Zusatz: „-SL“

Blendenhöhe: 150 mm
Lichte Innenhöhe: 120 mm

Tisch 650 x 450: Schublade Innenlichte 505 x 369 mm
Tisch 750 x 650: Schublade Innenlichte 605 x 569 mm
Tisch 950 x 650: Schublade Innenlichte 805 x 569 mm

SCHIEBEGRIFF



Schiebegriff aus CNS Rundrohr, Ø 25 mm
Artikel Nr - Zusatz: „-SG“

ZUSATZPLATTE




bündige fest verschweißte, oder
eingelegte und abnehmbare CNS-Platte
mittig zwischen oberer und unterer Platte

ZUSATZPLATTE ABKLAPPBAR



Bündige, abklappbare Zusatzplatte aus
CNS, an der kurzen Tischseite montiert.
Auch auf beiden Seiten möglich.

Artikel Nr:
HSOITPLK3545 - 350 x 450 mm
HSOITPLK3565 - 350 x 650 mm

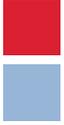

DAS HEiMOVE-EXPERTENTEAM BERÄT SIE GERNE PERSÖNLICH!

Themen- und Produktwissen in den Bereichen medizinisches Mobiliar, Sichtschutzsysteme, Schutzbekleidung sowie allgemeine Pflege- und Medizinprodukte:

HEiMOVE

RUDOLF HEINTEL GMBH

Erdbergstraße 166, 1030 Wien
T +43 (1) 403 89 56-0
F +43 (1) 403 89 56-50
medizintechnik@heintel.at

www.heintel.at

IMPRESSUM

Medieninhaber: Rudolf Heintel GmbH
Textgestaltung: © Rudolf Heintel GmbH
Grafik | Design | Reinzeichnung: Rudolf Heintel GmbH
Produktbilder: © Rudolf Heintel GmbH
Bilder: iStock Photo RobertBreitpaul

Die Unterlage wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und die Daten überprüft.
Satz- und Druckfehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden.

Version 1.0 | Stand: März 2021